

Stirnleuchten

Headlights



**Fiberoptik
Stirnleuchten**
**Fibre Optic
Headlights**
OP-Stirnleuchte
OT Headlight

Moderne fokussierbare Fiberoptik-Stirnleuchte mit Hochleistungsoptik, weitem Stellbereich und hoher Lichtleistung. Leichtes, komfortables Kopfband, Spezialkabel mit Halteclips (Teilung im Kopfbereich) für optimalen Tragekomfort.

Modern focusable Fibre Optic Headlight with high performance optical system, wide focus range and powerful light spot. Light weight and comfortable headband, special cable with grown clips for long time use at highest comfort.

für allgemeine Chirurgie und HNO
geteiltes, armiertes Spezialkabel

for general surgery and ENT
bifurcated, shielded special cable



08-585-S

▶ 08-580-GR

offenes Kopfband, grau

open headband, grey

▶ 08-580-S

offenes Kopfband, schwarz

open headband, black

▶ 08-585-GR

Kopfband mit Top, grau

headband with crossband, grey

▶ 08-585-S

Kopfband mit Top, schwarz

headband with top, black

für allgemeine Chirurgie und HNO
spezielles Monokabel

for general surgery and ENT
special monocable

▶ 08-580-S-Mono

offenes Kopfband, Monokabel, schwarz

open headband, monocable, black

▶ 08-580-GR-Mono

offenes Kopfband, Monokabel, grau

open headband, monocable, grey

▶ 08-585-S-Mono

Kopfband mit Top, Monokabel, schwarz

headband with crossband,
monocable, black

▶ 08-585-GR-Mono

Kopfband mit Top, Monokabel, grau

headband with crossband, mono-
cable, grey

für lange Operationen,
superleichtes Spezialkabel

for long operations,
super lightweight special cable

▶ 08-590-GR

offenes Kopfband, grau

open headband, grey

▶ 08-590-S

offenes Kopfband, schwarz

open headband, black

▶ 08-595-GR

Kopfband mit Top, grau

headband with crossband, grey

▶ 08-595-S

Kopfband mit Top, schwarz

headband with crossband, black



08-585-S-Mono



08-590-S



08-595-S

**Fiberoptik
Stirnleuchten**

**Fibre Optic
Headlights**

OP-Stirnleuchte

OT Headlight

- ▶ **08-360**
Moderne, fokussierbare Fiberoptik-Stirnleuchte mit Hochleistungs-Optik für hellste Ausleuchtung bei maximaler Fokussierung. Leichtes, komfortables Stirnband. Lieferung ohne Adapter für Projektorsanschluß (bitte gesondert bestellen). Kabel L=2,2 m. Bitte Reifenfarbe angeben: z.B.: schwarz (08-360-BL) oder grau (08-360-GR)
- ▶ **08-362**
wie 08-360, aber Projektorseite 90°
- ▶ **08-365**
wie 08-360, zusätzlich mit Kopfbügel
- ▶ **08-367**
wie 08-365, aber Projektorseite 90°



08-360-GR



08-365-GR

Mikrospot-Stirnleuchte

Microspot-Headlight

- ▶ **08-370**
für die Ausleuchtung kleinster Körperöffnungen. Ausstattung wie 08-360 (s.o.)
- ▶ **08-372**
wie 08-370, aber Projektorseite 90°
- ▶ **08-375**
wie 08-370, zusätzlich mit Kopfbügel
- ▶ **08-377**
wie 08-375, aber Projektorseite 90°



08-370-BL




08-375-BL

Lichtfleck

Spot sizes

- ▶ **08-360**
- ▶ **08-365**

Spot size
(dist. 30cm)
ø 50-100mm

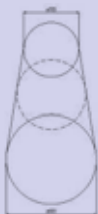

- ▶ **08-370**
- ▶ **08-375**

Spot size
(dist. 30cm)
ø 7-63mm



08-362 / 08-367 / 08-372 / 08-377

**Fiberoptik
 Miniatur-Stirnleuchte**
08-325

OP-Miniaturstirnleuchte mit optimierter Optik: fokussierbar, Faserbündel- \varnothing 3.5 mm. Durch Doppellinsensystem kleiner und homogener Lichtfleck. Lieferung ohne Adapter für Lichtquelle.

**Fibre Optic
 Miniature Headlight**

Advanced operation theatre version of miniature Headlight: fibre bundle- \varnothing 3.5 mm, double lens system, small and homogenous light spot. Delivery without light source adapter.

08-327

Wie 08-325, aber Projektorseite 90°

Same as 08-325, but projector side 90°



08-325

**Einfache OP-Stirnleuchte mit
 Kopfbügelstirnband**
08-445

Einfache fiberoptische Miniaturstirnleuchte für den OP-Bereich. Der unterbrechungsfreie Faserbündelquerschnitt von 2,6 mm und die verstellbare Kleinoptik mit Linsensystem gewährleisten einen sehr hellen Lichtfleck. Größe und Richtung des Spots können beliebig justiert werden. Das ergonomische Stirnband mit Kopfbügel und zentraler Einhandverstellung sorgt für bequemen Sitz auch über längere Zeit. Ohne Adapter für Lichtquelle

**Basic Miniature OT Headlight
 with crossband**

Fibre Optic miniature Headlight for operation theatre. The continuous fibre bundle of 2.6 mm diameter and the small optic effect a small and bright light spot. Size and direction of the spot can be adjusted. The ergonomic headband with crossband can be adjusted by one hand and provides comfortable wearing for long period of use. Without adapter for light source.



08-445 / 08-455

HNO-Modell Mikrofokus
08-455

Wie 08-445, aber mit hochwertiger Mikrofokus-Optik für besonders kleinen Lichtfleck

ENT-Modell Microfocus

Same as 08-445 but with Microfocus lens for extra small light spot



08-327 / 08-447

**Miniaturstirnleuchte mit
 Komfortstirnband**
08-330

Fiberoptische Miniaturstirnleuchte für den OP-Bereich. Miniatur-Hochleistungs-Optik, Faserbündel- \varnothing 3,5 mm, heller/homogener Lichtfleck, ledergepolstertes Stirnband mit seitlichen Kopfstützen und Stellrad. Lieferung ohne Adapter für Lichtquelle.

**Miniature Headlight with
 comfort headband**

Fibre Optic miniature Headlight for operation theatre. Perfect view by very small optic. The fibre bundle diameter of 3.5 mm and the double lens system effect a small and homogenous light spot. With lateral head supports. Easily adjustable by hand wheel. Supplied without adapter for light source.



08-330

08-332

Wie 08-330, aber Projektorseite 90°.

Same as 08-330 but projector side 90° angled.

08-330CC

Wie 08-330, aber hitzefeste Projektorseite.

Same as 08-330 but heat resistant projector side.

08-332CC

Wie 08-330CC, aber Projektorseite 90°.

Same as 08-330CC but projector side 90° angled.

**Miniaturstirnleuchte mit
 Kopfbügelstirnband**
08-335

Wie 08-330, mit Kopfbügelstirnband

Same as 08-330 but with cross band and 2 wheel adjustment headband



08-335

08-337

Wie 08-335, aber Projektorseite 90°.

Same as 08-335 but projector side 90° angled.

08-335CC

Wie 08-335, aber hitzefeste Projektorseite.

Same as 08-335 but heat resistant projector side.

08-337CC

Wie 08-335CC, aber Projektorseite 90° abgewinkelt.

Same as 08-335CC but projector side 90° angled.

08-335A

Wie 08-335, mit abnehmbarem Kabel.

Same as 08-335 but exchangeable cable



08-335A

08-337A

Wie 08-335A aber Projektorseite 90°

Same as 08-335A but projector side 90° angled.

08-335AC

Wie 08-335A, aber hitzefeste Projektorseite

Same as 08-335A but heat resistant projector side.

08-337AC

Wie 08-335AC, aber Projektorseite 90°

Same as 08-335AC but projector side 90° angled.



08-332 / 08-337

Fiberoptische HNO-Stirnleuchte nach Clar

Klassische HNO-Stirnleuchte mit kleinem Hochleistungs-Spiegelreflektor für maximalen Reflektionsgrad ohne Sichtbehinderung. Untere Spiegeleinbuchtung zur optimalen, monokularen Sicht. Komplett mit integriertem 2.2 m Glasfaserkabel und gepolstertem Stirnreif mit Schnellverstellung. Lieferung ohne Adapter für Lichtquelle.

▶ 08-312*

Fiberoptik HNO-Stirnleuchte nach Clar.

▶ 08-312G*

Wie 08-312, jedoch mit austauschbarem Standard-Kaltlichtkabel $\varnothing 3,5 \times 2300$ mm.

▶ 08-313*

Wie 08-312, aber Projektorseite 90° abgewinkelt.

**Auslaufmodell,
lieferbar nur auf Nachfrage*

Fibre Optic ENT Headlight by Clar

Classical ENT Headlight with small high performance concave mirror for optimal reflection without any restriction of view. The down sided indentation offers a monocular view. Complete with light weight fibre optic cable of 2.2 m and easily adjustable leather bolstered headband by two wheels for width and height. Supplied without adapter for light source.

Fibre Optic ENT Headlight by Clar.

Same as 08-312 but with exchangeable standard fibre optic cable $\varnothing 3.5 \times 2300$ mm.

Same as 08-312 but projector side 90° angled.

**To be discontinued
delivery only on request*



08-312*



08-350

HNO-Stirnleuchte Mikrofokus, Kaltlicht

▶ 08-355

Stirnleuchte mit stufenlos variablem Mikrofokus zur blendfreien Tiefenausschleuchtung. Durch kleinen Lichtaustritt und verstellbarer Kleinoptik optimales Sichtfeld. Komplett mit 2,2 m F/O-Kabel (Faserbündel $\varnothing 3,5$ mm) und ledergepolstertem Kopfbügel-Stirnreif. Ohne Adapter für Lichtquelle.

▶ 08-357

Wie 08-355, aber Projektorseite 90° .

▶ 08-350

Wie 08-355, aber Stirnband ohne Kopfbügel

▶ 08-352

Wie 08-350, aber Projektorseite 90° .

ENT Headlight Microfocus, fibre optic

Headlight with stepless variable micro focus for intensive depth illumination. Very small focus. 2.2 m F/O cable (fibre bundle $\varnothing 3.5$ mm). Ergonomic and leather bolstered headband with crossband. Supplied without adapter for light source.

Same as 08-355, but projector side 90° angled.

Same as 08-355, but head band without cross band

Same as 08-350, but projector side 90° angled.



08-355



08-313 / 08-352 / 08-357

Stirnleuchten-Systeme
Headlight Sets

▶ 12-750 Kaltlicht-Komplettsystem Halo150 bestehend aus:	Headlight Set Halo 150 including:
12-0150 Halogen Kaltlichtquelle HL 150, 150 W	Fibre Optic light source HL 150, 150 W
08-335 Fiberoptische Miniaturstirnleuchte für den OP-Bereich. Miniatur-Hochleistungs-Optik, Faserbündel- \varnothing 3,5 mm, heller/homogener Lichtfleck, ledergepolstertes Kopfbügelstirnband.	Fibre Optic miniature Headlight for operation theatre. High performance optical system, fibre bundle \varnothing 3.5 mm, double lens system, focusable and homogenous light spot, headband with cross band and wheel adjustment
12-671 Geräteträger 270 x 220 mit Doppelhaken für Lichtquelle und Stirnleuchte, Griff, Aluminiumfußkreuz, 5 Rollen	Mobile stand for light sources and head lights, plate 270 x 220 mm, double hook, aluminium five-star base, 5 rolls
▶ 12-785C Xenon Stirnleuchten-System bestehend aus:	Xenon Headlight System including:
12-500X 300 W Xenon Hochleistungskaltlichtquelle. Farbtemperatur ca. 5800 °K. Helligkeit mechanisch dimmbar über Folientasten.	300 W Xenon High Power light source for maximum light output, light intensity adjustable by diaphragm. Constant colour temperature about 5800 °K.
08-585-S Komfortable Stirnleuchte mit Hochleistungsoptik, strapazierfähiges, langlebige Glasfaserkabel, L=2,5 m, mit Halteclips, gepolstertes Stirnband (grau oder schwarz), über zwei zentrale Stellräder dem Kopf stufenlos anpassbar	Comfortable fiber optic headlight with high performance optic system, sturdy, long-life f/o cable, l=2.5 m, with gown clips, ergonomic foam bolstered headband (grey and black), easy adjustable with two central adjustment wheels
12-681 Geräteträger 400 x 350 mit Doppelhaken für Lichtquelle und Stirnleuchte, Griff, Aluminiumfußkreuz, 5 Rollen	Mobile stand for light sources and head lights, plate 400 x 350 mm, double hook, aluminium five-star base, 5 rolls
▶ 12-795C Xenon Stirnleuchten-Set bestehend aus:	Xenon Headlight Set including:
08-595-S Hochleistungsstirnleuchte	High performance headlight
12-500X Xenon Lichtquelle 300 W	Xenon light source 300 W
12-681 Geräteträger 400 x 350 mit Doppelhaken für Lichtquelle und Stirnleuchte, Griff, Aluminiumfußkreuz, 5 Rollen	Mobile stand for light sources and head lights, plate 400 x 350 mm, double hook, aluminium five-star base, 5 rolls



12-750



12-785C



12-795C

Stirnleuchten nach Clar Modern Line

Headlights by Clar Modern Line

Stirnleuchte Clar S131

Hochkomfortable klassische Stirnleuchte nach Clar, 6 V, 2,4 W. Reflektorspiegel, Licht fokussierbar. Keine Sichtbehinderung in Blickrichtung. Komfortabler Stirnreif mit Schnellverstellung. Gewicht ca. 200 g, Kabel 2 m, Bananenstecker.

Headlight Clar S131

Classical ENT-headlight by Clar, 6 Volt, 2.4 Watt. Special coated concave mirror. Adjustable light focus. Comfortable headband with adjustment wheel. Weight approx. 200 g, 2 m cable, banana plugs.



08-13106

▶ 08-13106

Stirnleuchte Clar S131, ø 55 mm

Headlight Clar S131, ø 55 mm

▶ 08-14106

Stirnleuchte Clar S131, ø 98 mm

Headlight Clar S131, ø 98 mm



08-14106

LED-Stirnleuchte Clar

Klassische Standard-Stirnleuchte nach Clar mit Spiegel-ø 55 mm und innovativer LED-Technologie. Leichtes, komfortables Modell.

LED-Headlight Clar

Classical standard headlight by Clar with mirror-ø 55 mm and LED-technology. Light weight, comfortable headlight.

▶ 08-13190

LED-Stirnleuchte nach Clar, ø 55 mm mit Batteriebox 6 V für 4x Baby-Zelle (c)

LED-Headlight by Clar, ø 55 mm with battery box 6 V for 4x battery type c



08-13190

▶ 08-13110

LED-Stirnleuchte nach Clar, ø 55 mm kabellos, mit Batteriebox für 3x AA Zelle am Reifen

LED-Headlight by Clar, ø 55 mm wireless, with battery box for 3x AA at the headband



08-13110

▶ 08-13150

LED-Stirnleuchte nach Clar, ø 55 mm für Netzbetrieb mit Steckertrafo 230 V

LED-Headlight by Clar, ø 55 mm with 230 V power adapter

**Stirnleuchten nach Clar
Classic line**

**Headlights by Clar
Classic Line**

Stirnlampe Clar F

Headlight Clar F

Ergonomischer, gepolsterter Stirnreif;
Lichtfokussierung per Drehknopf; leicht
wechselbarer Spiegel; 2 m teilbares
Kabel, Bananenstecker

Foam bolstered ergonomic headband;
light beam focusable by control knob;
easily replaceable mirror; 2 m divisible
cord with banana plugs

▶ **08-15106**

Spiegel ø 55 mm,
für Spannungsquelle 6 V

Mirror ø 55 mm, for power source 6 V

▶ **08-154**

Ersatzspiegel mit Rahmen für Clar F

Spare mirror for Clar F with frame

▶ **99-433**

Lampe 6 V, 1 A

Spare bulb 6 V, 1 A



08-15106

Stirnlampe Clar S, ø 55 mm

Headlight Clar S, ø 55 mm

Reflektorhohlspiegel ø 55 mm;
verstellbarer, ergonomischer Stirnreif;
2 m Zuleitung, Bananenstecker

Concave mirror ø 55 mm; adjustable
ergonomic head band; 2 m cord with
banana plugs

▶ **08-12104**

Für 4 V Spannungsquelle

For 4 V power source

▶ **08-12106**

Für 6 V Spannungsquelle

For 6 V power source

▶ **08-12110**

Für 10 V Spannungsquelle

For 10 V power source



08-12106

Stirnlampe Clar S, ø 98 mm

Headlight Clar S, ø 98 mm

Reflektorhohlspiegel ø 98 mm;
verstellbarer, ergonomischer Stirnreif;
2 m Zuleitung, Bananenstecker

Concave mirror ø 98 mm; adjustable
ergonomic headband; 2 m cord with
banana plugs

▶ **08-11104**

Für 4 V Spannungsquelle

For 4 V power source

▶ **08-11106**

Für 6 V Spannungsquelle

For 6 V power source

▶ **08-11110**

Für 10 V Spannungsquelle

For 10 V power source



08-11106

LED Stirnleuchten

LED Headlights

OP Stirnleuchte

OT Headlight

▶ 08-780

Moderne fokussierbare LED Stirnleuchte mit Hochleistungsoptik, weitem Stellbereich und scharf abgegrenztem Lichtfleck. Leichtes, komfortables und flexibles Kopfband, leistungsfähiger Li-Ion-Akku mit Gürtelclip, für längere OP geeignet. Lieferung inkl. Ladegerät. Erhältlich auch mit warmweißem Licht (bitte bei der Bestellung angeben) Reifenfarbe wählbar: schwarz (08-780-S), grau (08-780-GR)

Modern focusable LED headlight with powerful optical system, wide focus range and sharp limited light spot. Light weight, flexible and comfortable headband. Li-Ion battery box with belt clip, suitable for long surgery. Delivery including charger. Also available in warm white light (please specify when ordering) Headband colour selectable: black (08-780-S) or grey (08-780-GR)

▶ 08-785

Wie 08-780 jedoch Stirnband mit Kopfbügel

Same as 08-780 but headband with crossband

▶ 08-795

Kabellose, moderne, fokussierbare LED Stirnleuchte mit Hochleistungsoptik, extrem großem Stellbereich und scharf abgegrenztem Lichtfleck. Höchste Mobilität durch komplett kabellose Stromversorgung. Leichtes, komfortables Kopfband. Leistungsfähiger Li-Ion-Akku am Kopfband integriert. Lieferung inkl. Ladegerät. Erhältlich auch mit warmweißem Licht (bitte bei der Bestellung angeben) Reifenfarbe wählbar: schwarz (08-795-S), weiß (08-795-W)

Wireless, modern, focusable LED headlight with powerful optical system, wide range of focus and sharp limited light spot. Highest mobility by completely wireless power supply. Light weight and comfortable headband. Powerful and long lasting Li-Ion battery, box attached to the headband, delivery including charger. Also available in warm white light (please specify when ordering) Headband colour selectable: black (08-795-S), white (08-795-W)

▶ 08-790

Wie 08-795 jedoch offenes Stirnband ohne Kopfbügel

Same as 08-795 but headband without crossband



08-780-S



08-785-S



08-795-S



08-795-W




08-790-S

Lichtfleck

Light spot:

Abstand [cm]	Fleck - ø [mm]	Distance [cm]	Spot - ø [mm]
20	8 - 35	20	8 - 35
30	9 - 55	30	9 - 55
40	12 - 75	40	12 - 75

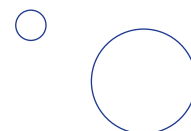

OP Stirnleuchte

Neuheit!

08-797 mit Wechselakku

Kabellose, moderne LED Stirnleuchte mit Hochleistungsoptik und Mikrofokus, extrem großem Stellbereich und scharf abgegrenztem Lichtfleck. Leistungsfähiger Li-Ion Wechsel-Akku; Lieferung inkl. Ladegerät für Ladung am Stirnreifen. Erhältlich auch mit warmweißem Licht (bitte bei der Bestellung angeben), Reifenfarbe wählbar: schwarz (08-797-S), weiß (08-797-W)

weitere Ausstattungen und Modelle auf Anfrage

OT Headlight

New Model!

Exchangeable Battery

Modern wireless LED Head light with powerful optical system and Microfocus, wide range of focus, sharp limited light spot. Powerful, easily changeable Li-Ion rechargeable battery pack. Set includes one battery and charger for charging at the headband. Also available in warm white light (please specify in your order) Headband color selectable: Black (08-797-S), white (08-797-W)

Various options and models on request



08-797-S

Hochleistungs-Stirnleuchte

Neuheit!

08-815

Kabellose Hochleistungs-Stirnleuchte, fokussierbar, Helligkeit komfortabel mit Touch-Dimmer einstellbar, flexibles, komfortables Stirnband für langen Einsatz, Set mit 2 Akkus für bis zu 7 stündigen Dauereinsatz ohne zu laden. Längere Einsatzzeiten möglich mit weiteren Akkus.

weitere Ausstattungen und Modelle auf Anfrage

High Power Head light

New Model!

Wireless High Power Head light Focusable wide range of light spot, illumination dimmable by a comfortable Touch Dimmer, flexible highly comfortable headband for long wearing without headache, set includes 2 batteries for use up to 7 hours without charging. Longer use possible with extra batteries.

Various options and models on request



08-815-S

Ersatzteile

08-205-815

Wechselakku Li-Ion für 08-797 und 08-815

10-10815

Externes Ladegerät für 08-815 und 08-797

10-10795

Steckerladegerät (nur für 08-795 Serie) ohne Bild

Spare parts

Li-Ion spare battery for 08-797 and 08-815

External charger for 08-815 and 08-797

Wall plug charger (only for 08-795 series) without picture



08-205-815



10-10815

LED-Stirnleuchten

LED-Headlights

Power-LED-Stirnleuchten

Power-LED-Headlights

▶ 08-139

Leistungsstarke, fokussierbare Stirnleuchte mit einer weißen Hochleistungs-LED. Leichtes, komfortables Modell. Inklusive Batteriebox.

High performance focusable headlight with white light power LED. Battery box included.

▶ 08-710

wie 08-139, aber mit Batteriebox (3x AA) am Reifen

same as 08-139, but with battery box (3x AA) fixed at the headband

▶ 08-741

wie 08-139, aber mit Li-Ion-Akkubox

same as 08-139, but with rechargeable Li-Ion battery box

▶ 08-750

wie 08-139, jedoch für Netzbetrieb

same as 08-139, but with mains adapter



08-139



08-710



08-741

LED-Mikro-Stirnleuchte

LED-Micro-Headlight

▶ 08-770

Leistungsstarke, fokussierbare LED-Stirnleuchte. Superleichtes, komfortables Modell mit Miniatur-Batteriebox und hoher Batterielaufzeit

High performance, focusable headlight. Extremely light weight, comfortable headlight with small battery box and long battery life time.

▶ 08-770W

wie 08-770, jedoch mit warmweißem Licht

same as 08-770, but with warm light



08-770

Einzelteile & Zubehör für LED-Stirnleuchten, siehe www.faromed.de

Spare parts and accessories for LED-Headlights, visit our website www.faromed.de

Stirnlampen und -spiegel

Headlights and Mirrors

Xenon Stirnleuchte mit integrierter Batteriebox

Xenon Headlight with integrated battery box

Helle Stirnleuchte mit 6000Cd Hochleistungs-Xenon-Lampe; optimiertes parabolisches optisches System mit Fixfocus; integrierte Batteriebox für 2 Mignonzellen (AA).

Very bright Xenon Headlight with high power optical system and fix focus. Special miniature Xenon incandescent reflector lamp (6000 candle power), integrated battery box for 2 AA cells

▶ 08-137

Xenon Stirnleuchte mit Batteriebox

Xenon headlight with battery box

▶ 99-08137

Ersatzlampe mit Reflektor

Spare lamp with reflector



08-137

Reflexspiegel nach Ziegler
Ziegler headmirror

- | | |
|---|---------------------------------|
| ▶ 08-143
Spiegel 90 mm, schmaler Stirnreif | Mirror 90 mm, narrow head band |
| ▶ 08-144
Spiegel 100 mm, schmaler Stirnreif | Mirror 100 mm, narrow head band |



08-143

Ersatzteile für Stirnlampen und Stirnspiegel
Components for Headlights

- | | |
|--|---|
| ▶ 99-01240
Ersatzlampe 4 V, 500 mA | Spare bulb 4 V, 500 mA |
| ▶ 99-01260
Ersatzlampe 6 V, 500 mA | Spare bulb 6 V, 500 mA |
| ▶ 99-01210
Ersatzlampe 10 V, 500 mA | Spare bulb 10 V, 500 mA |
| ▶ 08-114
Ersatzspiegel für Clar S, 98 mm für 08-11106 und 08-14106 | Mirror for Clar S, 98 mm for 08-11106 und 08-14106 |
| ▶ 08-124
Ersatzspiegel für Clar S, 55 mm für 08-12106 und 08-13106 | Mirror for Clar S, 55 mm for 08-12106 and 08-13106 |
| ▶ 08-154
Ersatzspiegel mit Fassung für Clar F, 55 mm für 08-15106 | Mirror incl. frame for Clar F, 55 mm for 08-15106 |
| ▶ 08-201
Stirnreif, breit, mit Kugelblech und Kabelhalter, für Clar-Stirnleuchte | Headband wide, with globe on metal sheet and cord holder, for Clar-Headlights |
| ▶ 08-203
Stirnreif, schmal, schwarz, für Ziegler Spiegel | Narrow headband, black, for Ziegler Mirror |
| ▶ 08-204
Verbindungsbacke für 08-143 und 08-144 | Connector for 08-143 and 08-144 |
| ▶ 08-207
Ziegler-Spiegel ohne alles, 90 mm | Mirror for Ziegler head mirror, 90 mm |



99-01260



08-201



08-203

- | | |
|--|---|
| ▶ 08-335-P4
Ersatzschaumpolster, Dermo Pad, schwarz, alternativ zu Lederpolster, atmungsaktiv, hohe Feuchtigkeitsaufnahme, hält die Haut trocken, schafft ein angenehmes und komfortables Gefühl | Replacement foam bolster, Dermo Pad, black, alternative to leather bolster, breathable, excellent moisture absorption, ensuring dry skin, creating a pleasant and comfortable sensation |
|--|---|



08-335-P4

Spannungsquellen
Power sources
**Steckernetzteil für
Stirnleuchten**
**Wall plug transformer for
headlights**
10-10216

Spannungsausgang 6 V, max. 1,5 A,
2x Bananenbuchse

Output voltage 6 V, max. 1.5 A,
2x banana plug



10-10216 / 10-10214-2

**Steckernetzteil für
Nystagmusbrillen**
**Wall plug transformer for
Nystagmus Spectacles**
10-10214-2

Spannungsausgang 4 V, max. 1,5 A,
2x Bananenbuchse

Output voltage 4 V, max. 1.5 A,
2x banana plug

10-10002

Kabel-Zwischenschalter

Cord switch



10-10002

Batteriebox
Battery box

Batteriebox 6 V für 4 Stk. Babyzellen-
Batterien (Typ C), mit Cinch-Buchse und
Schalter. Spannung kann mit Batterie-
einsatz auf 4,5 V (1x90-9902) und 3 V
(2x90-9902) gesenkt werden. Maße:
L × B × H 150 × 80 × 45 mm

Battery box 6 V for 4 batteries type C,
with cinch socket and switch. Voltage
can be reduced to 4.5 V (1 battery
dummy) or 3 V (2 battery dummies)
Measures: L × W × H
150 × 80 × 45 mm



08-205

08-205

Batteriebox 6 V

Battery box 6 V

10-10000

Adapter, Bananen-Buchsen auf
Cinch-Stecker

Adapter, banana sockets to cinch plug

90-9902

Batterieeinsatz Typ C

Battery dummy size C

Fiberoptische Stirnleuchten	Fibre Optic Headlights
LED-Stirnleuchten	LED Headlights
Konventionelle Stirnleuchten	Conventional Headlights
Stirnspiegel	Head Mirrors
Spannungsquellen	Mains Adapters

