

Stirnleuchte Clar S 98 Headlight Clar S 98

Klassische, äußerst preiswerte Standard-Stirnleuchte nach Clar mit Spiegel-Ø98mm.

Unsere Stirnleuchten zeichnen sich durch hohe Qualität, **hohe Lebensdauer** und ein optimales Preis/Leistungsverhältnis aus. Die **optimale Lichtausbeute** in Blickrichtung wird durch den speziell geformten Spiegel und eine **Silberbeschichtung** in Abstimmung mit der

besonderen Wendel in der Glühlampe erreicht. Auch tiefe Körperhöhlen können so optimal ausgeleuchtet werden.

Der **Lichtfleck** ist **fokussierbar**.

Der **ergonomisch** geformte Stirnreifen kann stufenlos eingestellt werden. Daher bleibt diese Stirnleuchte auch nach längerer Tragezeit **außerordentlich bequem**.

Die Lieferung erfolgt in stabilen, praktischen Kunststoffkoffer. Für den Betrieb ist ein Netztransformator mit min. 500mA notwendig. Die Stirnleuchten werden je nach Bedarf mit folgenden Spannungen geliefert:

4 V/500mA: Art.-Nr.: 08-11104
6 V/500mA: Art.-Nr.: 08-11106
10 V/500mA: Art.-Nr.: 08-11110

Ersatzteile:
Lampen: Nr. 99-01240 4V / 500mA
Nr. 99-01260 6V / 500mA
Nr. 99-01210 10V / 500mA

Spiegel: Nr. 08-114

Technische Angaben:
Gewicht: net. 175g / brut. 450g
Spiegel-Ø: ca. 98mm, Kabellänge: 2 m
Stecker: Bananenstecker Ø4mm (andere Stecker auf Nachfrage)

Stirnband: PE, weiß

Zubehör:
Tischtransformator 220V/0-10V 2A
Art.-Nr.: 10-100

Steckertransformator 220V/4, 6V 1A
Art.-Nr.: 10-10215


Schalter (zwischensteckbar)
Art.-Nr.: 10-10002

Classical low price standard headlight by Clar with comfortable headband and mirror-Ø98mm

Our headlights are designed and constructed for the highest standard of quality, **long lifetime**, and a competitive price. The light is **optimised** by a special lamp and focussed by the **silver coated mirror**, which gives the best possible reflection. Leading the light into the same direction of the eyes

sight, it is possible to inspect all deep holes of the body. The mirror can be adjusted by two ball joints and the light point is **focussable**.

The **ergonomic** headband can be step less adjusted. So our headlights are still **highly comfortable** to wear after long time. The headlight is delivered in a nice plastic case. For the use of the headlight any transformer with min. 500mA is needed (please order as accessory if required). The headlights can be delivered with the

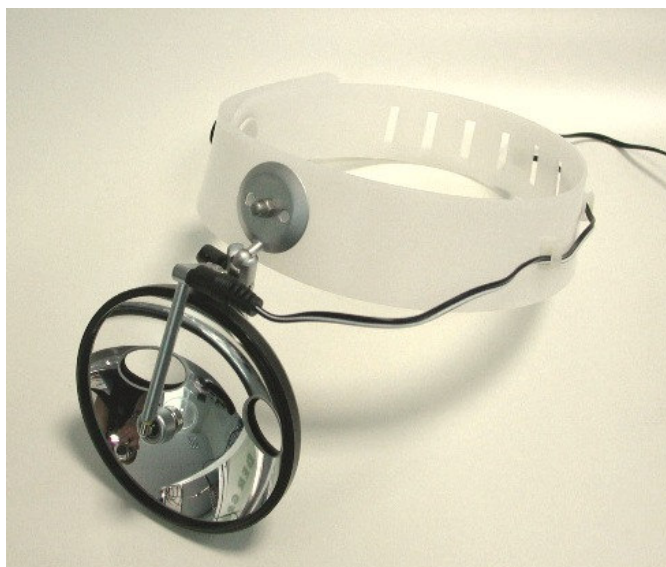

following voltages:
4 V/500mA: No.: 08-11104
6 V/500mA: No.: 08-11106
10 V/500mA: No.: 08-11110

Spare parts:
Lamps: No. 99-01240 4V / 500mA
No. 99-01260 6V / 500mA
No. 99-01210 10V / 500mA

Mirror: No. 08-114

Technical data:
Weight: net. 190g / brut. 450g
Mirror-Ø: 98mm, Length of cable: 2m
Plugs: Banana plugs Ø4mm
other plugs on request

Headband: PE, white

Accessories:
Desk transformer 220V/0-10V 2A
No.: 10-100

Wall plug transformer 220V/4; 6V 1A
No.: 10-10215

Switch Adapter
No.: 10-10002